

[Indicații]

Incrustații intratisulare , incrustații extratisulare și coroane


[Contraindicații și interdicții]

NU ÎNCERCAȚI SĂ UTILIZAȚI PRODUSUL ÎN ALTE SCOPURI DECÂT UTILIZAREA PREVĂZUTĂ.

NU UTILIZAȚI ACEST PRODUS LA PACIENȚII CU ANTECEDENTE DE ALERGIIL, CUM AR FI IRITAȚIE, LA ACEST PRODUS SAU LA ACID METACRILIC ȘI ACIZI SIMILARI SAU LA MONOMER METACRILAT.

[Formă, compoziție și principii]

1. Formă

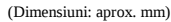

2. Nuanțe: A1*, A2, A3, A3.5, A4*, A3-LT*, A2-GR*, A3-GR*, A3.5-GR*

*A1, A4, A3-LT, GR nu au o gamă de dimensiuni medii

3. Compoziție

4. Principiu

Acest produs este un bloc pe bază de rășină care trebuie tăiat sau frezat cu o unitate de design și producție dentară asistată de computer pentru fabricarea restaurărilor dentare, cum ar fi încrustații intrasulare sau coroane.

[Utilizarea prevăzută și efect/eficacitate]

Acest produs este un material care trebuie tăiat sau frezat cu o unitate de design și producție dentară asistată de computer, în vederea fabricării restaurărilor polimerice pentru uz dentar.

[Instrucțiuni]

- (1) Măsurări un model de bont dentar folosind un aparat de scanare.
- (2) Creați date de frezare pe baza datelor de măsurare, folosind software.
- (3) Configurați acest produs într-un aparat de frezare și procesați-l folosind datele de frezare. După încheierea procesului de prelucrare, eliminați excesul de reziduu. Îndepărtați pulbera de la frezare și ale tipuri de pulberi rezultate în urma restaurării.
- (4) Corecți forma și lustruți în conformitate cu practica uzuală. Ca lustruire finală, lustruți cu un material de lustruire*1 pentru luciu.
- (5) În cazurile în care este necesară suprapunerea suplimentară sau caracterizarea după frezare, urmați instrucțiunile pentru rășina dentară utilizată pentru coroane și punți*2. Tratarea suprafeței cu un agent de pregătire a suprafeței care conține agent de cuplare cu silan*3 este necesară înainte de suprapunerea suplimentară.

[N.B.: Îndrumări tehnice și aspecte importante]

1. Când utilizați software-ul CAM sau aparatul de frezare, urmați manualul de instrucțiuni furnizat pentru fiecare dispozitiv și asigurați condițiile de procesare adecvate pentru acest produs.
2. Formați marginea cu o fațetă adâncă sau un prag rotund cu o grosime de peste 0,8 mm.
3. Setări grosimea șanțurilor și fosetelor mai mult de 1,0 mm și cuspei mai mult de 1,3 mm. Rotunjiți forma în orice zonă unghiulară.

4. Sablați (la aproximativ 0,2 până la 0,3 MPa) suprafața aderență a restaurărilor dentare folosind pulbere de oxid de aluminiu (aproximativ 50 μm). După montarea de probă, curățați suprafața aderență cu soluție de demineralizare cu acid fosforic și șpațiți și uscați pentru a îndepărta orice inhibitor de aderență, cum ar fi substanțele proteice conținute în salivă.
5. Pentru suprafața aderență a restaurărilor este necesar un tratament de suprafață cu un agent de pregătire a suprafeței care conține un agent de cuplare cu silan.
6. După uscare, utilizați un ciment de rășină adecvat, având în vedere capacitatea de aderență, nuanța și transparența materialului de bont.
7. Când utilizați material de ciment de rășină, urmați manualul de instrucțiuni furnizat.
8. Nu utilizați ciment de rășină pe bază de ionomer de sticlă pentru a lipi acest produs.

[Produse asociate]

- *1 polizor diamantat
 - Polizor diamantat C&B
 - Polizor diamantat C&B Nano
- *2 Rășină compozită pentru coroane și punți
 - Luna-Wing
 - TWiNY
- *3 Agent de pregătire a suprafeței care conține agent de cuplare cu silan
 - Multi Primer Repair Liquid One

[Precauții]

- (1) Acest produs trebuie să fie manevrat exclusiv de către personal calificat.
- (2) Nu utilizați acest produs în alte scopuri decât cele indicate în secțiunea [Utilizare prevăzută și efect/eficacitate].
- (3) Utilizați acest produs exclusiv pentru unități de design și de producție dentară asistate de computer care corespund dimensiunii acestui produs.
- (4) În cazurile în care riscul de fractură cauzată de malocluzie sau bruxism este ridicat, evaluați cu atenție maniera de utilizare a acestui produs pentru a evita fracturarea produsului.
- (5) În timpul frezării și lustruirii produsului polimerizat, utilizați un ventilator de evacuare local și o mască de protecție împotriva pulberilor, așa cum este aprobat de autoritatea locală, pentru a evita inhalarea pulberilor.
- (6) Purtați ochelari de protecție pentru a vă proteja ochii în timp ce frezați și lustruiți acest produs.
- (7) Mărimile min și medii ale acestui produs au o lățime (a) și o înălțime (b) diferite. Deoarece există caneluri în două direcții în dispozitivul de montare bloc, setarea este posibilă în orice direcție necesară pentru acel tip de caz clinic. Cu toate acestea, dacă setarea este făcută în direcția greșită, bara de frezare sau aparatul de frezare se poate rupe sau deteriora. Aveți grijă să faceți setarea în direcția corectă.
- (8) Medicii dentiști vor stabili dacă utilizarea acestui produs este adecvată de la caz la caz.
- (9) Atunci când eliminați acest produs, respectați ordonanțele și reglementările locale.
- (10) Nu utilizați și nu depozitați acest produs în apropierea unei flăcări deschise.
- (11) Îndepărtați excesul de ciment după fixarea restaurării.

[Atenționări de bază importante]

- (1) Opreți imediat utilizarea acestui produs în cazul apariției oricăror semne de alergie, precum iritație sau erupții cutanate, la pacienți. Dacă simptomele persistă, solicită ajutor medical.
- (2) Opreți imediat utilizarea acestui produs în cazul apariției oricăror semne de alergie, precum iritație sau erupții cutanate, la utilizatorii produsului. Dacă simptomele persistă, solicită ajutor medical.

[Alte atenționări]

Recomandați pacienților igiena orală zilnică, deoarece restaurările fixe sunt predispuse la apariția petelor sau la aderența pentru placa dentară, în funcție de obiceiurile alimentare ale pacienților.

[Păstrare și perioada de valabilitate]

(Păstrare)

- Păstrați produsul într-un loc uscat și răcoros, evitând expunerea la temperaturi ridicate, umezeală și lumina directă a soarelui.
 - Nu lăsați produsul la îndemâna altor persoane, cu excepția personalului stomatologic.
- (Perioada de valabilitate)
- Utilizați înainte de data de expirare înscrisă pe ambalaj.
 - Data de expirare este autenticată de YAMAKIN folosind datele companiei noastre.
 - Data de expirare indică termenul limită final pentru utilizarea acestuia.

(de exemplu, AAAA-XX înseamnă că data de expirare este sfârșitul lunii XX a anului AAAA.)

[Conținutul ambalajului]

5 bucăți per cutie (A1, A2, A3, A3.5, A4, A3-LT)

3 bucăți per cutie (A2-GR, A3-GR, A3.5-GR)

YAMAKIN CE 0123

YAMAKIN CO., LTD.
 1090-3 Otari, Kamibun, Kagami-cho,
 Konan-shi, Kochi, 781-5451, Japan
 E-Mail : contact@yamakin-gold.co.jp

MT Promedt Consulting GmbH
 Ernst-Heckel-Strasse 7, 66386 St. Ingbert, Germany
 Tel : +49 6894 581020 Fax : +49 6894 581021
 E-Mail : info@mt-procons.com